

Vorbereitungen

Raum:

- **Raumtemperatur:** sollte möglichst 22-24 Grad sein; tatsächliche Temperatur im Protokoll eintragen

VP-Arbeitsplatz:

- Aus VP-Liste die **Bogus-Pipeline-Bedingung** ablesen (Bogus Pipeline vs. Control).
- Entsprechendes Inquisit-Experiment starten:
 - Bogus Pipeline: „**as2_012014_BP.exp**“
 - Control: „**as2_012014_CTRL.exp**“
- Laufende VP-Nummer aus der VP-Liste eingeben
- **Gedanken-Zettel** und **Stift** bereit legen.
- VP-Nummer auf dem Gedanken-Zettel notieren.

Biopac-Gerät und Aufzeichnungs-Laptop:

- Nur bei **Bogus-Pipeline** physiologische Messung vorbereiten!
- Biopac-Gerät MP36 anschalten.
- Laptop hochfahren und **Biopac Student Lab 4.0** starten
- Oben „**Create/Record a new experiment**“ und unten „**Use recent graph template**“ auswählen. Dort „**dfg_study2_template.gtl**“ wählen -> OK klicken

Instruktionen und Anbringen der Elektroden

NUR für Bogus Pipeline! (bei Control Bedingung direkt zu *Untersuchung* starten)

1. **Information** = Bogus Pipeline Manipulation (!!!), daher diesen Abschnitt möglichst wörtlich so wiedergeben; dabei Biopac-Gerät etc. zeigen:


„Wir haben Ihnen ja schon per E-Mail mitgeteilt, dass wir uns auch für physiologische Maße interessieren und deshalb werden wir bei Ihnen gleich die Hautleitfähigkeit messen.“

Wir verwenden dazu dieses Messgerät, das wir in dieser Studie als Lügendetektor einsetzen, um sozial erwünschtes Antworten zu kontrollieren. Vorherige Forschung hat gezeigt, dass wir anhand bestimmter Kennwerte der Hautleitfähigkeit relativ gut erkennen können, ob jemand ehrliche Angaben macht oder lügt.

Dazu werde ich Ihnen jetzt als Erstes Elektroden an Zeige- und Mittelfinger ankleben.“

2. VP an den Experimental-Computer setzen. Handyton ausschalten lassen.
3. **Elektroden** zur Hautleitfähigkeitsmessung anbringen:
 - Erfragen: **Rechts- oder Linkshänder?**
 - Nicht-dominante Hand mit Handinnenfläche nach oben auf dem Tisch ablegen lassen (zur Begründung der nicht-dominanten Hand: „**meist dünnere Hornhaut und dann können Sie mit der anderen Hand den Computer bedienen und schreiben.**“).
 - Elektroden an Zeige- und Mittelfinger (medial) **aufkleben**:

- **Nicht zu straff** (Blutfluss soll nicht beeinträchtigt werden)
- **Kabel** anklemmen
- Kabel zwischen Daumen und Zeigefinger leiten und am Arm mit Hansaplast **fixieren**

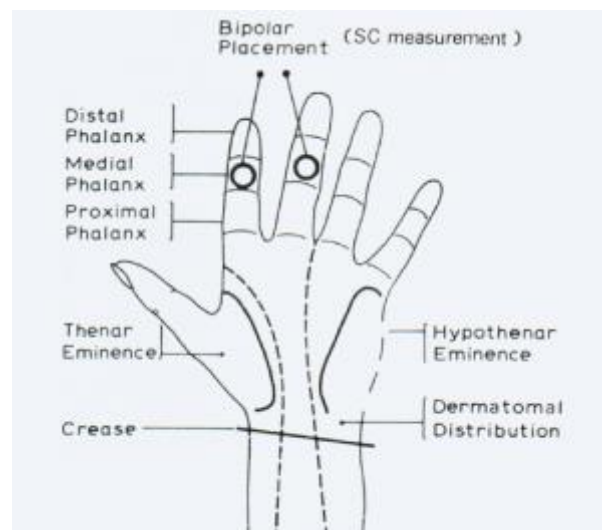

(Fortsetzung nächste Seite ...)

(Fortsetzung **Bogus Pipeline**)

4. **Instruktion:**

- VP instruieren: **„Bitte lassen Sie die Hand einfach ruhig so auf dem Tisch liegen und versuchen Sie, sie so wenig wie möglich zu bewegen, weil wir sonst so viele Störsignale rausrechnen müssen.“**

5. **„Kalibrierung“**

- **„So, ich werde jetzt das Gerät einstellen und eine kurze Kalibrierung vornehmen. Dazu werde ich Ihnen gleich ein paar Anweisungen geben.“**
- Messung starten: In Biopac Student Lab auf *Start* klicken.
- **1.: „Bitte atmen Sie ganz tief ein und halten die Luft kurz an und atmen dann wieder aus.“**
- Wenn Messung OK, weiter, sonst Elektroden usw. kontrollieren.
- **2.: „Ich zeige Ihnen jetzt eine Karte mit einer Zahl zwischen 1 und 6. Bitte merken Sie sich die Zahl.“**
- Dann: **„Ich werde jetzt eine Reihe von Zahlen abfragen. Ihre Aufgabe ist es, auf jede Zahl mit JA zu antworten.“** ----- „1 2.....3.....4.....5.....6.....“
- [kurz warten ...]
- **„Gut, dann können wir jetzt beginnen und die eigentliche Untersuchung starten. Ich würde Sie bitten, während der Untersuchung nicht zu reden und die Hand mit den Elektroden nicht zu bewegen.“**

→ Untersuchung starten

Bei Nachfragen zum Lügendetektor:

Ggf. knapp und unspezifisch antworten und darum bitten, sich bis zum Ende der Untersuchung zu gedulden: Dann gerne alle Fragen beantworten.

Z.B.:

- Bei Zweifeln: „Es gibt derzeit noch keinen perfekten Lügendetektor, aber hiermit kommen wir dem schon sehr nahe.“
- „Vorherige Forschung hat gezeigt, dass im Labor Lügen sehr gut erkannt werden. Viel besser als bei echten Kriminaldelikten...“
- „Ich werde Ihnen dann am Ende der Untersuchung gerne alle Fragen beantworten.“

Untersuchung starten

- VP instruieren: „*Der Computer wird Sie nun durch die Untersuchung leiten*“
- Handyton ausschalten lassen

Während der Untersuchung:

- Falls **VP-Code** nicht akzeptiert wird: Im VP-Protokoll von VP generierten Code notieren und am PC den Testcode „scc“ eingeben.

Biopac Student Lab während Messung:

- Störungen, Reden, Husten, Niesen, seufzen etc. mit **Hotkeys** markieren: **ESC-Taste** drücken bei jedem dieser Ereignisse
- Um die Kurve während der Messung optimal zu skalieren: **STRG+Y**

Nach der Untersuchung:

- Ggf. Hautleitfähigkeitsmessung stoppen.
- **Debriefing:**
 1. Untersuchen physiologische Reaktionen auf historische Ereignisse und Einstellungen gegenüber betroffenen Gruppen.
 2. VP mitteilen, dass nach Abschluss der Datenerhebung (Anfang Juni) eine ausführliche Aufklärung über die Zielsetzung und Ergebnisse der Studie versendet wird. Jetzt noch keine Aufklärung über Bogus Pipeline!
 3. Debriefing-Schnippi mitgeben
- **Hautleitfähigkeitsdaten speichern:** Unbedingt **save as...** verwenden und **VP-Nummer** als Dateinamen eintragen (z.B. 101.acq)!

-
- Am Ende des Erhebungstages: Daten (Hautleitfähigkeit sowie Inquisit) aufs **Z-Laufwerk** kopieren.